

Produktdatenblatt Gesichtsschutzmaske „AllegraMask® PRO“ PSA

1. Produktbezeichnung

Gesichtsschutzmaske (Mund- und Nasenschutz) „AllegraMask® PRO“ PSA; Persönliche Schutzausrüstung nach EU-Verordnung 2016/425, Anhang I Kategorie I und Anhang IV

2. Verwendungszweck / Anwendungsbereiche

Die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Sie schafft bei einer normalen Atmung eine dichte Barriere zwischen den Anwendern und kann somit auch als Zusatzschutz eingesetzt werden, zum Beispiel im medizinischen Bereich zusätzlich zur OP-Maske. Die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ schützt vor schwach aggressiven Reinigungsmitteln im Gesichtsbereich (Mund- und Nasenbereich), die bei der Verwendung im beruflichen oder privaten Umfeld verwendet werden. Die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ schützt außerdem vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen. Der Anwendungsbereich der „AllegraMask® PRO“ liegt im medizinischen Bereich, der Pflege, dem Rettungswesen, der Gastronomie, in Werkstätten und allen betroffenen Arbeitsgebieten, welche den gleichen o.g. Schutzzweck benötigen. Weiterhin ist sie für vielfältige Bereiche des öffentlichen Lebens einsetzbar, wie z. B. in der Schule, in der Betreuung, in der Beratung, im Service oder im Verkauf.

3. Funktionsbeschreibung

Die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ wird über den Nase-Mund-Bereich wie eine Brille aufgesetzt. Die Passform sollte hierbei den Mund- und Nasenbereich vollständig abdecken. Ist das nicht der Fall, sollte die Maske nicht verwendet und der Hersteller kontaktiert werden.

4. Sicherheitshinweise / Kontraindikationen

Zu Ihrer eigenen Sicherheit sowie der Sicherheit Dritter beachten Sie bitte folgende Punkte:

- ACHTUNG:** Die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ bietet keinen Schutz vor biologischen Agenzien.
- ACHTUNG:** Vor erstmaligem Gebrauch bitte die „AllegraMask® PRO“ reinigen und vor dem Aufsetzen prüfen, ob alle Teile festsitzen und unbeschädigt sind.
- ACHTUNG:** Die „AllegraMask® PRO“ schützt nur im Abdeckungsbereich. Ggfs. muss zusätzlich ein Augenschutz verwendet werden.
- ACHTUNG:** Gesichtsschutzmaske vor jeder Benutzung auf Beschädigungen und korrekte Passform überprüfen.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, ansonsten kann es zu Einschränkungen der Funktion oder der Biokompatibilität kommen.
- ACHTUNG:** Nicht geeignet für Kleinkinder, u.a. wegen Kleinteile die verschluckt werden können.
- Beachten Sie bitte zur Vermeidung einer Infektion oder bakteriellen Kontamination den Abschnitt „Reinigung und Desinfektion“
- ACHTUNG:** Die Gesichtsschutzmaske wird mit einer Halteschnur geliefert. Bitte beachten Sie hierzu ggfs. die für Ihre Verwendung geltenden Bestimmungen der UVV. Bei Arbeiten an Maschinen usw. kann bei starkem Zug eine Verletzungsgefahr auftreten. Bitte die Halteschnur nur so anbringen, dass sie sich bei leichtem Zug vom Bügel löst.
- Bei sicherheitsrelevanten Tätigkeiten mit Detailblick nach unten sollte die „AllegraMask® PRO“ nicht verwendet werden, da das Sichtfeld beeinträchtigt werden kann.
- Unbedenklichkeit: Von den eingesetzten Materialien ist nicht bekannt, dass sie für den Benutzer schädlich sind, Hautreizungen oder Atembeschwerden verursachen. Es kann jedoch vorkommen, dass Materialien, die mit der Haut des Trägers in Kontakt kommen, bei anfälligen Personen allergische Reaktionen hervorrufen können. In diesen Fällen ist die Maske nicht zu verwenden und den Hersteller zu kontaktieren.
- Solte bei längerem Tragen der Maske Unwohlsein auftreten, ist die Maske abzunehmen, nicht weiter zu verwenden und den Hersteller zu kontaktieren.
- Die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ bietet keinen Schutz gegen mechanische Einwirkung, Stöße, Splitter, mechanische Teile und ähnliches.
- Die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ sollte nicht verwendet bzw. ausgetauscht werden, wenn sie rissig oder anderweitig beschädigt sind, Änderungen in Form und Farbe aufzeigt, Chemikalien, Ölen oder Fetten ausgesetzt waren, großer Hitze oder über lange Zeit der Sonne ausgesetzt waren. Schäden sind für den Endbenutzer möglicherweise nicht sichtbar.

5. Reinigung und Desinfektion

Reinigen oder desinfizieren Sie die Maske bitte nach jedem Gebrauch. Bei einem Anwenderwechsel sollte die Gesichtsschutz-Maske desinfiziert werden.

5.1. Reinigung

Waschen Sie alle Teile im warmen Wasser mit Hilfe einer pH- neutralen Seifenlösung bzw. mit alkalischem Reinigungsmittel; anschließend unter fließendem warmen Wasser abspülen damit Rückstände entfernt werden. Stark alkalische, säurehaltige oder alkoholhaltige Medien sowie harte Bürsten, Trockenreinigung mit Papier, Scheuermittel oder andere Materialien, welche die Oberflächen beschädigen können, dürfen nicht verwendet werden.

5.2. Desinfektion

Eine Desinfektion aller Kunststoffteile aus MABS, SEBS oder Polycarbonat kann mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln, die für Kunststoffmaterialien geeignet sind, durchgeführt werden. Hierbei sollte auf alkoholbasierte Desinfektionsmittel verzichtet werden, da ansonsten die Beschichtung beschädigt werden kann. Die Herstellerangaben über Einwirkzeiten bzw. Anwendungskonzentrationen der Desinfektionsmittel müssen unbedingt eingehalten werden. Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise des Desinfektionsmittels des Herstellers.

6. Antibeschlag und Antistatikmittel

Antibeschlag und Antistatikmittel sind als sinnvolle Ergänzung anwendbar. Bei Verwendung ist nur das von uns angegebene Mittel zu verwenden, ansonsten kann es zu Einschränkungen der Funktion oder der Biokompatibilität kommen. Beachten Sie in diesem Fall auch die Sicherheitshinweise des Herstellers.

7. Technische Daten / Lagerung/Transport

Lagertemperatur: - 40 °C bis 60 °C

Einsatztemperatur: -18 °C bis 50 °C

Einsatzdauer: Es wird empfohlen die Gesichtsschutz-Maske „AllegraMask® PRO“ maximal zwei Stunden ohne Unterbrechung zu tragen. Lagerung: Lagerung wird im Wäsche- oder Baumwollbeutel empfohlen. Nicht in der Sonne liegen lassen.

8. Material

1	Bügel	MABS
2	Nasenhalter	SEBS
3	Schutzmaske	PC
4	Halteschnur	Baumwolle

9. Ersatzteile / Zubehör

- Bügel
- Schutzschild
- Halteschnur
- Nasenhalter

10. Haftungsausschlussklausel

Die obigen Informationen sind nach unserem besten Wissen korrekt. Es wird jedoch nicht behauptet, dass diese vollständig sind, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern, basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. Haftung ausgeschlossen.

11. Zeichenerklärung

	Latex frei		Vor Hitze und Licht schützen
	Nicht zur Wiederverwendung		Bestellnummer
	Gebrauchsanweisung beachten		Chargenbezeichnung
	Haltbar bis		Enthält Phthalat
	Hergestellt am		Phthalatfrei



FAIST MEKATRONIC SRL
Nicolae Filipescu 18 | RO - 410605 Oradea
E-Mail: info@allegramask.com| www.allegramask.com
Phone +40 359 803 600 | Fax +40 359 803 602

Konformität nach PSA EU regulation 2016/425



Product data sheet Face mask „AllegraMask® PRO“ PPE

1. Product name

Face protection mask (mouth and nose protection) „AllegraMask® PRO“ PPE; Personal protective equipment according to EU Regulation 2016/425, Annex I Category I and Annex IV

2. Intended use / areas of application

The face protection mask „AllegraMask® PRO“ protects against drops and splashes of liquids. In normal breathing, it creates a dense barrier between the users and can therefore also be used as additional protection, for example in the medical area in addition to the surgical mask. The face mask „AllegraMask® PRO“ protects against weakly aggressive cleaning agents in the face area (mouth and nose area) that are used in the professional or private environment. The „AllegraMask® PRO“ face mask also protects against superficial mechanical injuries. The area of application of the „AllegraMask® PRO“ is in the medical field, nursing, rescue, catering, in workshops and all affected areas of work that share the same above Need protection purpose. It can also be used for a variety of areas in public life, such as B. in school, in supervision, in advice, in service or in sales.

3. Description of function

The face protection mask „AllegraMask® PRO“ is placed over the nose-and-mouth area like glasses. The fit should completely cover the mouth and nose area. If this is not the case, the mask should not be used and the manufacturer should be contacted.

4. Safety instructions / contraindications

For your own safety and the safety of third parties, please note the following points:

- ATTENTION:** The face mask „AllegraMask® PRO“ does not offer any protection against biological agents.
- ATTENTION:** Before first use, please clean the AllegraMask and check before putting it on whether all parts are stuck and undamaged.
- ATTENTION:** The „AllegraMask® PRO“ only protects in the covered area. Possibly eye protection must also be used.
- ATTENTION:** Check the face mask for damage and correct fit before each use.
- Only original spare parts may be used, otherwise the function or biocompatibility may be restricted.
- ATTENTION:** Not suitable for small children, e. g. because of small parts that can be swallowed.
- To avoid infection or bacterial contamination, please refer to the section “Cleaning and disinfection”
- ATTENTION:** The face mask is delivered with a tether. Please note the UVV regulations that apply to your use. When working on machines etc., there is a risk of injury if there is a strong pull. Please attach the tether so that it detaches from the bracket when you pull it gently.
- The „AllegraMask® PRO“ should not be used for safety-relevant activities with a detailed view downwards, as the field of vision may be impaired.
- Harmlessness: The materials used are not known to be harmful to the user, cause skin irritation or breathing difficulties. However, materials that come into contact with the wearer’s skin may cause allergic reactions in susceptible individuals. In these cases, do not use the mask and contact the manufacturer.
- If you feel uncomfortable wearing the mask for a longer period of time, remove the mask, stop using it and contact the manufacturer.
- The face protection mask “AllegraMask® PRO” offers no protection against mechanical impact, shocks, splinters, mechanical parts and the like.
- The “AllegraMask® PRO” face protection mask should not be used or replaced if it is cracked or otherwise damaged. Shows changes in shape and color, has been exposed to chemicals, oils or fats, has been exposed to extreme heat or long exposure to the sun. Damage may not be visible to the end user.

5. Cleaning and disinfection

Please clean or disinfect the mask after each use. The face protection mask should be disinfected when changing the user.

5.1. Cleaning

Wash all parts in warm water using a pH-neutral solution, soap solution or with an alkaline cleaning agent; then rinse under warm running water to remove residues. Strongly alkaline, acidic or alcoholic media as well as hard brushes, dry cleaning with paper, abrasive cleaners or other materials that can damage the surfaces must not be used.

5.2. disinfection

A disinfection of all plastic parts made of MABS, SEBS or polycarbonate can be carried out with commercially available disinfectants suitable for plastic materials. Alcohol-based disinfectants should not be used, as otherwise the coating may be damaged. The manufacturer’s information on exposure times or Application concentrations of disinfectants must be strictly adhered to. Please also observe the safety instructions of the disinfectant of the manufacturer.

6. Anti-fog and anti-static agents

Anti-fogging and anti-static agents can be used as useful supplements. When using, only the means specified by us should be used. In this case, also observe the manufacturer’s safety instructions.

7. Technical data / storage / transport

Storage temperature: - 40 ° C to 60 ° C Note: liquid media may only be stored above 0 degrees Celsius

Operating temperature: -18 ° C to 50 ° C

Duration of use: It is recommended to wear the face mask “AllegraMask® PRO” for a maximum of two hours without interruption.

Storage: Storage is recommended in laundry or cotton bags. Don’t leave it in the sun.

8. Materials

1	Bracket	MABS
2	Nose pad	SEBS
3	Visor	PC
4	Strap	Cotton

9. Spare parts / accessories

- Bracket
- protective shield
- strap
- nose pad

10. Disclaimer of liability

To the best of our knowledge, the information above is correct. However, it is not claimed that these are complete and it should therefore only be considered as a guideline. The information provided here is intended to describe the product with regard to the necessary safety precautions. It is not intended to guarantee certain properties, is based on the current state of our knowledge and does not constitute a contractual legal relationship. The company cannot be held responsible for any damage caused by handling or contact with the above product. Liability excluded.

11. Legenda

	Latex free		Protect from heat and light
	Not for reuse		Order number
	Follow the instructions		Batch name
	Best before [date]		Contains phthalate
	Manufactured on		Phthalate free



FAIST MEKATRONIC SRL
Nicolae Filipescu 18 | RO - 410605 Oradea
E-Mail: info@allegramask.com| www.allegramask.com
Phone +40 359 803 600 | Fax +40 359 803 602

Conformity according to PPE EU regulation 2016/425



Scheda tecnica del prodotto Mascherin „AllegraMask® PRO“ DPI

1. Nome del prodotto

Mascherina di protezione facciale (protezione per naso e bocca) „AllegraMask® PRO“ DPI; Dispositivo di Protezione Individuale in conformità con la normativa EU 2016/425, Allegato I Categoria I e Allegato IV

2. Destinazione d’uso

“AllegraMask® PRO” è un dispositivo che protegge dalla trasmissione per via aerea di malattie infettive. Durante la normale respirazione il dispositivo crea una barriera tra l’utente e terzi e può essere utilizzata come protezione aggiuntiva, ad esempio nel settore medico-chirurgico. La mascherina “AllegraMask® PRO” protegge da detersivi debolmente aggressivi nella zona del viso (zona della bocca e del naso) utilizzati in ambienti professionali o privati. La mascherina “AllegraMask® PRO” protegge anche dalle lesioni meccaniche superficiali. L’area di applicazione di “AllegraMask® PRO” è nel campo medico, infermieristico, servizi di soccorso, gastronomia, nelle officine e in tutte le aree di lavoro interessate che condividono lo stesso sopra Hai bisogno di uno scopo di protezione. Inoltre, può essere utilizzato per una varietà di aree della vita pubblica, come B. a scuola, nella supervisione, nella consulenza, nel servizio o nelle vendite.

3. Modo d’uso

AllegraMask® si indossa come un paio di occhiali e protegge naso e bocca grazie alla sua visiera. Nel caso in cui la suddetta area non venisse coperta mandare segnalazione al produttore.

4. Sicurezza e Controindicazioni

Per la sicurezza propria e di terzi seguire le seguenti indicazioni:

- ATTENZIONE:** La mascherina “ AllegraMask® PRO” non offre alcuna protezione contro gli agenti biologici.
- ATTENZIONE:** al primo utilizzo pulire AllegraMask® e verificare che tutte le parti siano integre e fissate correttamente.
- ATTENZIONE:** “AllegraMask® PRO” protegge solo nell’area coperta. Se necessario devono essere utilizzate anche protezioni per gli occhi.
- ATTENZIONE:** verificare che la mascherina per il viso non sia danneggiata e che si adatti correttamente prima di ogni utilizzo.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali, per non comprometterne la funzione.
- ATTENZIONE:** non adatto a bambini e neonati poiché il dispositivo è costituito da parti piccole che potrebbero essere ingerite
- Fare riferimento alla sezione “pulizia e disinfezione” per evitare contaminazioni batteriche.
- ATTENZIONE:** la mascherina facciale viene fornita con un laccio. Si prega di notare le normative UVV che si applicano al proprio utilizzo. Quando si lavora su macchine, ecc., C’è il rischio di lesioni se c’è una forte trazione. Attaccare il laccio in modo che si stacchi dalla staffa quando lo si tira delicatamente.
- “AllegraMask® PRO” non dovrebbe essere utilizzata in attività in cui è richiesto un certo standard di sicurezza poiché il campo visivo potrebbe essere limitato.
- I materiali di cui è composto il prodotto non sono nocivi alla salute, non provocano irritazioni cutanee o difficoltà respiratorie. Tuttavia, in soggetti dermatologicamente sensibili potrebbero insorgere reazioni allergiche. In questo caso, non utilizzare la mascherina e contattare il produttore.
- L’uso prolungato della mascherina potrebbe non risultare confortevole. In questo caso interrompere l’uso e contattare il produttore.
- “AllegraMask® PRO” non è un dispositivo di sicurezza sul lavoro pertanto non offre protezione da urti, schegge o impatti meccanici e altro.
- La mascherina di protezione per il viso “AllegraMask® PRO” non deve essere utilizzata o sostituita se presenta crepe o danni in altro modo, mostra cambiamenti di forma e colore, è stata esposta a sostanze chimiche, oli o grassi, calore estremo o lunghi periodi di sole sono stati esposti. Il danno potrebbe non essere visibile all’utente finale.

5. Pulizia e disinfezione

Si prega di pulire o disinfettare la mascherina dopo ogni utilizzo.

5.1 Pulizia

Lavare tutte le parti in acqua calda utilizzando una soluzione a pH neutro, una soluzione di sapone o un detergente alcalino; quindi sciacquare sotto acqua corrente calda per rimuovere i residui. Non utilizzare mezzi fortemente alcalini, acidi o alcolici, spazzole dure, lavaggio a secco con carta, abrasivi o altri materiali che possono danneggiare le superfici.

5.2. disinfezione

Tutte le parti possono essere disinfettate utilizzando prodotti adatti ai materiali di cui è costituito il prodotto. Non utilizzare disinfettanti a base alcolica che potrebbero danneggiare i trattamenti. Si prega di rispettare le indicazioni date dal produttore riguardo a tempi e modalità di disinfezione. Leggere attentamente anche le istruzioni del prodotto utilizzato.

6. Agenti antiappannamento e antistatici

È possibile utilizzare solo prodotti anti appannamento e antistatici indicati dal produttore. Pertanto osservare anche le istruzioni del prodotto utilizzato.

7. Dati tecnici / immagazzinamento / trasporto

Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 60°C

ATTENZIONE: il liquido anti-appannamento è da conservarsi a temperature superiori a 0°C

Temperatura di utilizzo: da -18°C a 50°C

Tempi di utilizzo: si consiglia di indossare “AllegraMask® PRO” per un massimo di due ore consecutive

Conservazione: si consiglia di riporre “AllegraMask® PRO” in un sacchetto di cotone. Non esporre ai raggi del sole.

8. Materiali

1	Astine	MABS
2	Nasello	SEBS
3	Visiera	PC
4	Cordino	COTONE

9. Pezzi di ricambio/accessori

- Astine
- Visiera
- Nasello
- Cordino

10. Scarico di responsabilità

Le informazioni qui riportate hanno lo scopo di essere una linea guida del prodotto in relazione alle necessarie precauzioni di sicurezza e si basano sullo stato attuale delle conoscenze del produttore, pertanto non costituiscono rapporto giuridico contrattuale. L’azienda produttrice non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni causati da manipolazione o uso differente da quanto sopra indicato.


11. Spiegazione dei simboli

	Non contiene latex		Non esporre a fonti di calore o luce
	Non riutilizzabile		Numero d’ordine
	Seguire le istruzioni		Nome del lotto
	Da consumarsi preferibilmente (data)		Contiene ftalati
	Prodotto il		Senza ftalati



FAIST MEKATRONIC SRL
Nicolae Filipescu 18 | RO - 410605 Oradea
E-Mail: info@allegramask.com| www.allegramask.com
Phone +40 359 803 600 | Fax +40 359 803 602

Conformità al regolamento DPI UE 2016/425

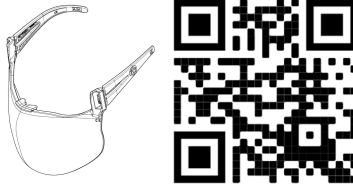

Fiche technique du produit Masque „AllegraMask® PRO“ EPI

1.Désignation du produit

Masque facial (protection de la bouche et du nez) „AllegraMask® PRO“ EPI ; équipement de protection individuelle conforme au règlement de l’UE 2016/425, annexe I catégorie I et annexe IV

2. Utilisation conforme / domaines d’application

Le masque facial “AllegraMask® PRO” protège contre les gouttes et les éclaboussures de liquides. Il crée une barrière étanche entre les utilisateurs pendant la respiration normale et peut donc également être utilisé comme protection supplémentaire, par exemple dans le domaine médical en plus du masque chirurgical.

3. Description de la fonction

Le masque de protection du visage “AllegraMask® PRO” est mis sur le nez et la bouche comme une paire de lunettes. L’ajustement doit couvrir complètement la zone de la bouche et du nez. Si ce n’est pas le cas, le masque ne doit pas être utilisé et le fabricant doit être contacté. Le masque facial “AllegraMask® PRO” protège contre les agents nettoyants faiblement agressifs au niveau du visage (zone de la bouche et du nez) qui sont utilisés dans des environnements professionnels ou privés. Le masque facial “AllegraMask® PRO” protège également contre les blessures mécaniques superficielles. Le domaine d’application de “AllegraMask® PRO” est dans le domaine médical, les soins infirmiers, les services de secours, la gastronomie, dans les ateliers et tous les domaines de travail concernés qui partagent les mêmes éléments ci-dessus Besoin d’un but de protection. De plus, il peut être utilisé dans divers domaines de la vie publique, tels que B. à l’école, en supervision, en conseil, en service ou en vente.

4. Consignes de sécurité / contre-indications

Pour votre propre sécurité et celle des autres, veuillez observer les points suivants :

- ATTENTION:** Le masque facial “AllegraMask® PRO” n’offre aucune protection contre les agents biologiques.
- ATTENTION:** Avant d’utiliser l’ “AllegraMask® PRO” pour la première fois, veuillez le nettoyer et vérifier que toutes les pièces sont bien serrées et non endommagées avant de le mettre en place.
- ATTENTION:** Le “AllegraMask® PRO” ne protège que dans la zone couverte. Peut-être une protection oculaire doit également être utilisée.
- ATTENTION:** vérifiez que le masque facial n’est pas endommagé et qu’il est bien ajusté avant chaque utilisation.
- Seules les pièces de rechange d’origine peuvent être utilisées, sinon la fonction ou la biocompatibilité peuvent être limitées.
- ATTENTION :** Ne convient pas aux enfants en bas âge, etc. à cause des petites pièces qui peuvent être avalées
- Pour éviter toute infection ou contamination bactérienne, veuillez vous référer à la section “Nettoyage et désinfection”
- ATTENTION:** Le masque facial est livré avec une attache. Veuillez noter les réglementations UVV qui s’appliquent à votre utilisation. Lors de travaux sur des machines, etc., il existe un risque de blessure en cas de forte traction. Veuillez attacher l’attache afin qu’elle se détache du support lorsque vous la tirez doucement.
- L’ “AllegraMask® PRO” ne doit pas être utilisé pour des activités liées à la sécurité avec une vue détaillée vers le bas, car le champ de vision peut être altéré.
- Innocuité : les matériaux utilisés ne sont pas connus pour être nocifs pour l’utilisateur, pour provoquer des irritations de la peau ou des difficultés respiratoires. Cependant, les matériaux qui entrent en contact avec la peau du porteur peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Dans ces cas, n’utilisez pas le masque et contactez le fabricant.
- Si vous ne vous sentez pas bien après avoir porté le masque pendant une longue période, retirez le masque, cessez de l’utiliser et contactez le fabricant.
- Le masque facial “AllegraMask® PRO” n’offre pas de protection contre les chocs mécaniques, les éclats, les pièces mécaniques et autres.
- La mascherina di protezione per il viso “AllegraMask® PRO” non deve essere utilizzata o sostituita se è rotta o danneggiata in qualsiasi altro modo, mostra cambiamenti di forma e colore, è stata esposta a sostanze chimiche, oli o grassi, o è stata esposta a calore estremo o al sole per lungo tempo sono stati esposti. Il danno potrebbe non essere visibile all’utente finale.

5. Nettoyage et désinfection

Veuillez nettoyer ou désinfecter le masque après chaque utilisation. Lors du changement d’utilisateur, le masque facial doit être désinfecté.

5.1 Nettoyage

Laver toutes les pièces dans de l’eau chaude en utilisant une solution de savon au pH neutre ou avec un détergent alcalin ; puis rincer à l’eau courante chaude pour éliminer les résidus. Les milieux fortement alcalins, acides ou alcoolisés ainsi que les brosses dures, les nettoyeurs abrasifs ou autres matériaux susceptibles d’endommager les surfaces ne doivent pas être utilisés.

5.2. désinfection

Une désinfection de toutes les pièces plastiques en MABS, SEBS ou polycarbonate peut être effectuée avec des désinfectants disponibles dans le commerce et adaptés aux matières plastiques. Les désinfectants à base d’alcool ne doivent pas être utilisés, sinon le revêtement risque d’être endommagé. Les informations du fabricant sur les durées d’exposition ou Les concentrations d’application des désinfectants doivent être strictement respectées. Veuillez également respecter les consignes de sécurité du désinfectant du fabricant.

6. Agents anti-buée et antistatiques

Des agents anti-buée et antistatiques peuvent être utilisés comme complément utile. En cas d’utilisation, seul l’agent spécifié par nous doit être utilisé, sinon il peut y avoir des restrictions de fonction ou de biocompatibilité. Dans ce cas, veuillez également respecter les consignes de sécurité du fabricant.

7. Données techniques / stockage / transport

Température de stockage: -40 ° C à 60 ° C Remarque: les milieux liquides ne peuvent être stockés qu’à des températures supérieures à 0 degrés Celsius

Température de fonctionnement: -18 ° C à 50 ° C

Folha de dados do produto Máscara facial „AllegraMask® PRO” EPI

1. Nome do produto

Máscara de proteção facial (boca e nariz) „AllegraMask® PRO” EPI; Equipamento de proteção individual previsto no Regulamento da UE 2016/425, Anexo I Categoria I e Anexo IV

2. Finalidade / Áreas de aplicação

A máscara de protecção facial „AllegraMask® PRO” protege contra gotas e respingos de líquidos. Com a respiração normal, cria uma barreira densa entre os usuários e, portanto, também pode ser usado como proteção adicional, por exemplo, no campo médico, além da máscara cirúrgica.

A máscara facial “AllegraMask® PRO” protege contra agentes de limpeza fracamente agressivos na região do rosto (boca e nariz), que são usados no ambiente profissional ou privado.

A máscara facial “AllegraMask® PRO” também protege contra lesões mecânicas superficiais.

A área de aplicação do “AllegraMask® PRO” é na área médica, assistencial, serviços de resgate, gastronomia, em oficinas e em todas as áreas de trabalho afetadas que tenham os mesmos acina mencionados Precisa de propósito de proteção. Além disso, pode ser usado para uma variedade de áreas da vida pública, como B. na escola, na supervisão, no conselho, no serviço ou nas vendas.

3. Descrição da função

A máscara de proteção facial “AllegraMask® PRO” é colocada sobre a área da boca do nariz como óculos. O ajuste deve cobrir completamente a área da boca e do nariz. Se este não for o caso, a máscara não deve ser usada e o fabricante deve ser contactado.

4. Instruções / contra-indicações de segurança

Para sua própria segurança, bem como para a segurança de terceiros, observe os seguintes pontos:

- ATENÇÃO: A máscara facial “AllegraMask® PRO” não oferece nenhuma proteção contra agentes biológicos.
- ATENÇÃO: Antes do primeiro uso, limpe o “AllegraMask® PRO” e verifique se todas as peças estão presas e intactas antes de colocá-las.
- Somente peças de reposição originais podem ser usadas, caso contrário, podem haver limitações de função ou biocompatibilidade.
- ATENÇÃO: Não é adequado para crianças pequenas, por exemplo, por causa de pequenas partes que podem ser engolidas.
- ATENÇÃO: O “AllegraMask® PRO” protege somente na área coberta. Se necessário proteção para os olhos também deve ser usada.
- CUIDADO: Verifique se a máscara facial está danificada e se ajusta corretamente antes de cada uso.
- Para evitar infecções ou contaminação bacteriana, consulte a seção “Limpeza e Desinfecção”
- ATENÇÃO: A máscara facial é fornecida com um cordão. Observe os regulamentos UVV que se aplicam ao seu uso. Ao trabalhar em máquinas, etc., há risco de ferimentos se houver um puxão forte. Prenda a corda de forma que ela se desprenda do suporte ao puxá-la com cuidado.
- Para atividades relevantes para a segurança com vistas a detalhar para baixo, o “AllegraMask® PRO” não deve ser utilizado, pois o campo de visão pode ser afetado.
- Segurança: Os materiais utilizados não são conhecidos por serem prejudiciais ao usuário, causando irritação na pele ou dificuldades respiratórias. No entanto, pode acontecer que materiais que entram em contato com a pele do usuário possam causar reações alérgicas em indivíduos vulneráveis. Nestes casos, a máscara não deve ser usada e entrar em contato com o fabricante.
- Se sentir desconforto com o uso prolongado da máscara, remova a máscara, pare de usá-la e entre em contato com o fabricante.
- A máscara de proteção facial “AllegraMask® PRO” não protege contra ação mecânica, impactos, lascas, peças mecânicas e afins.
- A máscara de proteção facial “AllegraMask® PRO” não deve ser usada ou substituída se estiver rachada ou danificada de qualquer outra forma, apresentar alterações na forma e cor, tiver sido exposta a produtos químicos, óleos ou gorduras, calor extremo ou longos períodos de sol foram expostos. Os danos podem não ser visíveis para o usuário final.

5. Limpeza e desinfecção

Por favor, limpe ou desinfete a máscara após cada uso. Em caso de alteração do usuário, a máscara de proteção facial deve ser desinfetada.

5.1. Limpeza

Lave todas as peças em água morna com a ajuda de uma solução de sabão neutra em pH ou solução de sabão, com detergente alcalino; em seguida, enxágue sob água quente corrente para remover resíduos. Midias alcalinas, ácidas ou alcoólicas, bem como escovas duras, abrasivos ou outros materiais que possam danificar as superfícies não devem ser utilizados.

5.2. desinfecção

A desinfecção de todas as peças plásticas feitas de MABS, SEBS ou policarbonato pode ser realizada com desinfetantes disponíveis comercialmente adequados para materiais plásticos. Os desinfetantes à base de álcool devem ser dispensados, caso contrário, o revestimento pode ser danificado. Informações do fabricante sobre os tempos de operação e As concentrações de aplicação de desinfetantes devem ser respeitadas. Observe também as instruções de segurança do desinfetante do fabricante.

6. Agentes anti-embaçantes e antiestáticos

Agentes anti-embaça e antiestático são aplicáveis como um suplemento útil. Ao utilizar, apenas os meios indicados por nós devem ser utilizados, caso contrário, pode haver limitações de função ou biocompatibilidade. Neste caso, observe também as instruções de segurança do fabricante.

7. Dados técnicos / armazenamento / transporte

Temperatura de armazenamento: - 40 ° C a 60 ° C Nota: meio líquido só pode ser armazenado acima de 0 graus Celsius
Temperatura de operação: -18 ° C a 50 ° C
Duração de uso: Recomenda-se usar a máscara facial “AllegraMask®” por no máximo duas horas ininterruptas.
Armazenamento: Recomenda-se o armazenamento em uma embalagem ou saco de algodão. Não o deixe ao sol.

1	Suporte	MABS
2	Almofada nasal	SEBS
3	Viseira	PC
4	Alça	Algodão

9. Peças de reposição / acessórios

- Suporte
- Escudo protetor
- alça
- almofada nasal


10. Isenção de responsabilidade

As informações acima estão corretas ao máximo de nosso conhecimento. No entanto, não se alega que eles estão completos e, portanto, só podem ser considerados como uma direção. As informações aqui fornecidas destinam-se a descrever o produto em relação às precauções de segurança necessárias, não se destina a garantir certas características, baseia-se no estado atual de nosso conhecimento e não estabelece uma relação jurídica contratual. A empresa não pode ser responsabilizada por qualquer dano causado pelo manuseio ou contato com o produto acima. Responsabilidade excluída.

	Sem látex		Proteger do calor e da luz
	Não para reutilização		Número do pedido
	Siga as instruções		Nome do lote
	Melhor antes da data		Contém ftalato
	Fabricado em		Sem ftalatos



FAIST MEKATRONIC SRL
Nicolae Filipescu 18 | RO - 410605 Oradea
E-Mail: info@allegramask.com| www.allegramask.com
Phone +40 359 803 600 | Fax +40 359 803 602

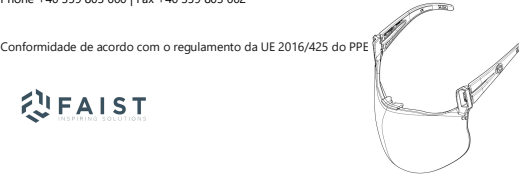

Conformidade de acordo com o regulamento da UE 2016/425 do PPE

FAIST
MEKATRONIC SRL

Hoja de datos del producto Mascarilla „AllegraMask® PRO” EPI

1.Nombre del producto

Máscara de protección facial (protección de la boca y la nariz) „AllegraMask® PRO” EPI; Equipo de protección personal de conformidad con el Reglamento de la UE 2016/425, anexo I, categoría I, y anexo IV

2. Uso previsto / áreas de aplicación

La máscara de protección facial “AllegraMask® PRO” protege contra gotas y salpicaduras de líquidos. Crea una densa barrera entre los usuarios en caso de respiración normal y, por lo tanto, también puede utilizarse como protección adicional, por ejemplo, en el ámbito médico además de la máscara quirúrgica.

La mascarilla facial “AllegraMask® PRO” protege contra agentes limpiadores débilmente agresivos en la zona del rostro (zona de la boca y la nariz) que se utilizan en el ámbito profesional o privado.

La mascarilla facial “AllegraMask® PRO” también protege contra lesiones mecánicas superficiales.

El área de aplicación del “AllegraMask® PRO” es en el campo médico, enfermería, rescate, restauración, en talleres y todas las áreas de trabajo afectadas que compartan lo mismo anterior Necesita protección. Además, se puede utilizar para una variedad de áreas de la vida pública, como B. en la escuela, en supervisión, en asesoramiento, en servicio o en ventas.

3. Descripción de la función

La máscara de protección facial “AllegraMask® PRO” se coloca sobre la zona nariz-boca como gafas. El ajuste debe cubrir completamente la zona de la boca y la nariz. Si no es así, no debe usarse la máscara y debe ponerse en contacto con el fabricante.

4. Instrucciones de seguridad / contraindicaciones

Para su propia seguridad y la de terceros, por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:

- ATENCIÓN: La mascarilla “AllegraMask® PRO” no ofrece ninguna protección frente a agentes biológicos.
- ATENCIÓN: Antes de la primera utilización, limpie la “AllegraMask® PRO” y compruebe que todas las piezas están firmas y no están dañadas.
- ATENCIÓN: El “AllegraMask® PRO” solo protege en el área cubierta. Posiblemente también debe usarse protección para los ojos.
- PRECAUCIÓN: Verifique que la mascarilla no esté dañada y que se ajuste correctamente antes de cada uso.
- Si se pueden utilizar piezas de recambio originales, de lo contrario puede haber limitaciones en la función o la biocompatibilidad.
- ATENCIÓN: No apto para niños pequeños, entre otros por piezas pequeñas que se pueden tragar
- Para evitar la infección o la contaminación bacteriana, consulte la sección “Limpeza y desinfección”
- ATENCIÓN: La mascarilla se entrega con una correa. Tenga en cuenta las normas UVV que se aplican a su uso. Al trabajar en máquinas, etc., existe el riesgo de lesiones por tirones fuertes. Por favor, coloque la correa de modo que se desprenda del soporte cuando tire suavemente.
- Para las actividades relacionadas con la seguridad con una visión detallada hacia abajo, no se debe utilizar „AllegraMask® PRO” ya que el campo de visión puede verse afectado.
- Seguridad: se desconoce que los materiales utilizados son perjudiciales para el usuario, provocan irritación cutánea o problemas respiratorios. Sin embargo, los materiales que entran en contacto con la piel del portador pueden provocar reacciones alérgicas en personas vulnerables. En estos casos, la máscara no debe utilizarse y debe pensarse en contacto con el fabricante.
- En caso de malestar durante el uso prolongado de la máscara, retire la máscara, deje de usarlo y póngase en contacto con el fabricante.
- La máscara de protección facial „AllegraMask® PRO” no ofrece protección contra la acción mecánica, impactos, fragmentos, piezas mecánicas y similares.
- La máscara de protección facial “AllegraMask® PRO” no debe usarse ni reemplazarse si está agrietada o dañada de cualquier otra manera, muestra cambios de forma y color, ha estado expuesta a productos químicos, aceites o grasas, o ha estado expuesta a calor extremo o al sol durante mucho tiempo. fueron expuestos. Los daños pueden no ser visibles para el usuario final.

5. Limpieza y desinfección

Limpie o desinfecte la máscara después de cada uso. Si se cambia de usuario, se debe desinfectar la máscara de protección facial.

5.1 Limpieza

Lave todas las partes en agua caliente con una solución de jabón o solución de jabón pH neutro, con detergente alcalino; a continuación, enjuagar con agua caliente corriente para eliminar los residuos. No se deben utilizar medios alcalinos, ácidos o alcohólicos, ni cepillos duros, abrasivos u otros materiales que puedan dañar las superficies.

5.2. desinfección

La desinfección de todas las piezas de plástico de MABS, SEBS o policarbonato puede realizarse con desinfetantes convencionales adecuados para materiales plásticos. Debe evitarse la utilización de desinfetantes a base de alcohol, ya que, de lo contrario, el revestimiento puede verse dañado. La información del fabricante relativa a los tiempos de acción o Es imprescindible que se respeten las concentraciones de los desinfetantes. Tenga en cuenta también las instrucciones de seguridad del desinfetante del fabricante.

6. Agentes antiavaho y antiestáticos

Los antiincrustantes y los antiestáticos son aplicables como complemento útil. En caso de que se utilicen únicamente los medios indicados por nosotros, de lo contrario pueden producirse limitaciones de la función o de la biocompatibilidad. En este caso, consulte también las instrucciones de seguridad del fabricante.

7. Datos técnicos / almacenamiento / transporte

Temperatura de almacenamiento: - 40 ° C a 60 ° C Nota: los medios líquidos solo pueden almacenarse a temperaturas superiores a 0 grados Celsius
Temperatura de funcionamiento: -18 ° C a 50 ° C
Duración del uso: Se recomienda llevar la mascarilla “AllegraMask®” durante un máximo de dos horas sin interrupción.
Almacenamiento: Se recomienda guardarlo en bolsas de algodón o de lavandería. No lo dejes al sol.

1	Suporte	MABS
2	Almohadilla de nariz	SEBS
3	Visera	PC
4	Correa	Cotton

9. Repuestos / accesorios


- soporte
- Escudo protector
- Correa
- almohadilla nasalfabricante)

10. Descargo de responsabilidad

Hasta donde sabemos, la información anterior es correcta. Sin embargo, no se afirma que estos estén completos y, por lo tanto, solo deben considerarse como una guía. La información proporcionada aquí tiene la intención de describir el producto con respecto a las precauciones de seguridad necesarias, no tiene la intención de garantizar ciertas propiedades, se basa en el estado actual de nuestro conocimiento y no constituye una relación legal contractual. La empresa no se hace responsable de los daños causados por la manipulación o el contacto con el producto anterior. Responsabilidad excluída.

11. Legenda


	Sin látex		Proteger del calor y la luz.
	No para reutilizar		Número de orden
	Sigue las instrucciones		Nombre del lote
	Consumir preferentemente antes del		Contiene ftalato
	Fabricado en		Libre de ftalato

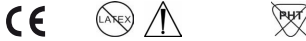

FAIST MEKATRONIC SRL
Nicolae Filipescu 18 | RO - 410605 Oradea
E-Mail: info@allegramask.com| www.allegramask.com
Phone +40 359 803 600 | Fax +40 359 803 602

Conformidad según el reglamento EPI UE 2016/425

FAIST
MEKATRONIC SRL

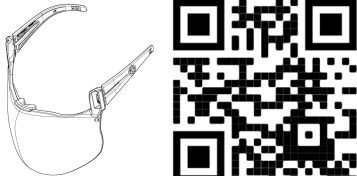

Produktudatablad Ansigtsbeskyttelsesmaske „AllegraMask® PRO” PPE

1. Produktnavn

Ansigtsmaske (mund- og næsebeskyttelse) „AllegraMask® PRO” PPE; Personligt beskyttelsesudstyr i henhold til EU-regulativ 2016/425, bilag I, kategori I og bilag IV

2. Formål / Anvendelsesområder

Ansigtsmasken „AllegraMask® PRO” beskytter mod dråber og væskeprøjt. Ved normal vejtrækning skaber det en tæt barriere mellem brugeren og kan derfor også bruges som ekstra beskyttelse, for eksempel inden for det medicinske område ud over den kirurgiske maske. Ansigtsmasken “AllegraMask®” beskytter mod kontakt med aggressive væsker som rengøringsmidler eller desinfektionsmidler i ansigtet (mund- og næseområdet), som bruges i det professionelle eller private miljø.

Anvendelsesområdet for AllegraMask® er inden for det medicinske område, sygepleje, retnings tjenester og alle berørte arbejdsområder, som er de samme som ovenfor. Brug for beskyttelsesformål. Desuden kan den bruges til en række områder i det offentlige liv, såsom B. i skolen, under tilsyn, rådgivning, service eller salg.

3. Funktionsbeskrivelse

Ansigtsbeskyttelsesmasken „AllegraMask® PRO” blev sat på over næse- og mundområdet som briller. Tilpasningen kaldes munden og næseområdet hører hjemme her. Er det ikke efteråret, at masken ikke blev forkølet, og producenten gjorde det.

4. Sikkerhedsinstruktioner / kontraindikationer

Af hensyn til din egen sikkerhed og tredjeparters sikkerhed skal du være opmærksom på følgende punkter:

- OBS: Ansigtsmasken “AllegraMask® PRO” tilbyder ingen beskyttelse mod biologiske agenser.
- OBS: Før du bruger „AllegraMask® PRO” første gang, skal du rengøre den, og inden du sætter den på, skal du kontrollere, at alle dele er stramme og ubeskadigede.
- OBS: “AllegraMask® PRO” beskytter kun i det overdækkede område. Hvis det er nødvendigt øjenbeskyttelse skal også anvendes.
- FORSIGTIG: Kontrollér ansigtsmasken for beskadigelse og korrekt pasform inden hver brug.
- Der må kun bruges originale reservedele, ellers kan funktionen eller biokompatibiliteten være begrænset.
- OBS: Ikke egnet til små børn osv. på grund af små dele, der kan sluges
- Se afsnittet “Rengøring og desinfektion” for at undgå infektion eller bakteriel kontaminering.
- OBS: Ansigtsmasken leveres med et bånd. Bemærk de UVV-regler, der gælder for din brug. Ved arbejde på maskiner osv. Er der risiko for personskade, hvis der er et stærkt træk. Fastgør båndet, så det løsner sig fra beslaget, når du trækker det forsigtigt.
- „AllegraMask® PRO” bør ikke bruges til sikkerhedsrelevante aktiviteter med et detaljeret kig ned, da synsfeltet kan blive forringet.
- Sikkerhed: De anvendte materialer vidste ikke at være skadelige for brugeren, forårsage hudirritation eller ånderætsbesvær. Der er dog lejligheder, hvor materialer i kontakt med bærerens hud kan forårsage allergiske reaktioner hos modtagelige individer. I disse tilfælde bør masken ikke bruges, og producenten skal kontaktes.
- Hvis du føler dig utilpas, mens du bærer masken i lang tid, skal du fjerne masken, stoppe med at bruge den og kontakte producenten.
- Ansigtmasken „AllegraMask® PRO” giver ingen beskyttelse mod mekanisk stød, stød, splinter, mekaniske dele og lignende.
- “AllegraMask® PRO” ansigtsbeskyttelsesmaske må ikke bruges eller udskiftes, hvis den er revnet eller beskadiget på anden måde, viser ændringer i form og farve, har været udsat for kemikalier, olie eller fedtstoffer, ekstrem varme eller lange solperioder blev udsat. Skader er muligvis ikke synlige for slutbrugeren.

5. Rengøring og Desinfektion

Rengør eller desinficér masken efter hver brug. Når du skifter bruger, skal ansigtsmasken desinficeres.

5.1. Rengøring

Vask alle dele i varmt vand med en pH-neutral opløsning, sæbeopløsning eller med et alkalisk rengøringsmiddel; skyl derefter under varmt rindende vand for at fjerne rester. Stærkt alkaliske, sure eller alkoholholdige medier samt hård børste, skuremidler eller andre materialer, der kan beskadige overflademå, må ikke anvendes.

5.2. Desinfektion

Alle plastiske fremstillet af MABS, SEBS eller polycarbonat kan desinficeres med kommercielt tilgængelige desinfektionsmidler, der er egnede til plastmaterialer. Her bør alkoholbaserede desinfektionsmidler undgås, da belegningen ellers kan blive beskadiget. Producentens oplysninger om eksponeringstider og applikationskoncentrationer af desinfektionsmidlerne skal overholdes nøje. Overhold også sikkerhedsinstruktionerne for producentens desinfektionsmiddel.

6. Anti-tåge og antistatiske midler

Anti-fogging og antistatiske midler kan bruges som nyttige kosttilskud. Ved brug skal kun den agent, der er specificeret af os, anvendes, ellers kan der være begrænsninger i funktion eller biokompatibilitet. I dette tilfælde skal du også overholde producentens sikkerhedsinstruktioner.

7. Tekniske data / opbevaring / transport

Opbevaringstemperatur: - 40 ° C til 60 ° C
Dristemperatur: -18 ° C til 50 ° C
Brugstid: Det anbefales at bære ansigtsmasken „AllegraMask® PRO” i maksimalt to timer uden afbrydelse.
Opbevaring: Opbevaring i tøj- eller bomuldspose anbefales. Lad det ikke være i solen.

1	Bøjle	MABS
2	Næseholder	SEBS
3	Beskyttelsesmaske	PC
4	Tether	bomuld

9. Reservedele og tilbehør

- Bøjle
- Beskyttelsesafskærmning
- fastgørelse
- Næseholder

10. Haftungsausschlussklausel

Die obigen Informationen sind nach unserem besten Wissen korrekt. Es wird jedoch nicht behauptet, dass diese vollständig sind, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet werden. Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern, basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Firma kann nicht für irgendwelche Schäden, die durch den Umgang oder Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden. Haftung ausgeschlossen.


11. Zeichenerklärung

	Latex fri		Beskyt mod varme og lys
			Ordrenummer
			Batchnummer
	Bedst før [dato]		Indeholder ftalat
	Fremstillet den		Ftalatfri



FAIST MEKATRONIC SRL
Nicolae Filipescu 18 | RO - 410605 Oradea
E-Mail: info@allegramask.com| www.allegramask.com
Phone +40 359 803 600 | Fax +40 359 803 602

Conformity according to PPE EU regulation 2016/425

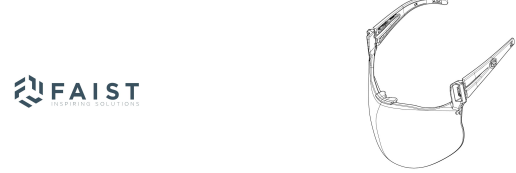

Fișa tehnică a produsului Mască „AllegraMask® PRO” EIP

1. Denumirea produsului

Mască de protecție a feței („AllegraMask® PRO” EIP; Echipament individual de protecție în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/425, anexa I, categoria I și anexa IV.

2. Utilizare prevăzută / domenii de aplicare

Masca de protecție a feței „AllegraMask® PRO” protejează împotriva picăturilor și stropilor de lichide. În timpul respirației normale, creează o barieră densă între utilizatori și, prin urmare, poate fi folosită și ca protecție suplimentară, de exemplu în domeniul medical, în plus față de masca chirurgicală.

Masca de față “AllegraMask® PRO” protejează împotriva agenților de curățare slab agresivi din zona feței (zona gurii și a nasului) care sunt utilizați în medii profesionale sau private. Masca de față “AllegraMask® PRO” protejează și împotriva leziunilor mecanice superficiale.

Domeniul de aplicare al „AllegraMask® PRO” este în domeniul medical, asistență medicală, servicii de salvare, gastronomie, în ateliere și în toate domeniile de lucru afectate care împărtășesc același lucru mai sus al nevoie de scop de protecție. Poate fi, de asemenea, utilizat pentru o varietate de domenii din viața publică, cum ar fi în școală, în supraveghere, în consiliere, în service sau în vânzări.

3. Descriere funcțională

Masca de protecție a feței „AllegraMask® PRO” se pune ca o pereche de ochelari peste zona nasului și a gurii. Aceasta trebuie să acopere complet zona gurii și a nasului. În cazul în care zona menționată nu se acoperă, masca nu trebuie folosită și trebuie să contactați producătorul.

4. Instrucțiuni de siguranță / contraindicații

Pentru siguranța proprie și a celorlalți, respectați următoarele indicații:

- ATENȚIE:** Masca de față “AllegraMask® PRO” nu oferă nicio protecție împotriva agenților biologici.
- ATENȚIE:** Vă rugăm să curățați „AllegraMask® PRO” înainte de prima utilizare, și verificați înainte de fiecare utilizare integritatea acesteia.
- ATENȚIE:** „AllegraMask® PRO” protejează numai în zona acoperită. Dacă este necesar trebuie folosită și protecția ochilor.
- ATENȚIE:** Verificați dacă masca de față este deteriorată și se potrivește corect înainte de fiecare utilizare.
- ATENȚIE:** Se pot utiliza numai piese de schimb originale, alfel pot exista restricți privind funcționalitatea sau biocompatibilitatea.
- ATENȚIE:** Nu este potrivită pentru copii mici, inclusiv din cauza pieselor mici care pot fi înghițite.
- ATENȚIE:** Pentru a evita infecția sau contaminarea bacteriană, vă rugăm să consultați secțiunea „Curățare și dezinfecție”.
- ATENȚIE:** Masca de față este livrată cu un snur. Vă rugăm să rețineți reglementările SSM care se aplică utilizării dvs. Când lucrați la mașini etc., există riscul de rănire dacă există o tracțiune puternică. Vă rugăm să așteptați prinderea, astfel încât să se desprindă de suport când o trageți ușor.
- ATENȚIE:** „AllegraMask® PRO” nu trebuie utilizată pentru activități relevante din punct de vedere al siguranței, care necesită o vedere detaliată în jos, deoarece câmpul vizual poate fi afectat. – Inofensivitate: Materialele utilizate nu sunt cunoscute ca fiind dăunătoare pentru utilizator, nu provoacă iritații ale pielii sau dificultăți de respirație. Cu toate acestea, materialele care intră în contact cu pielea purtătorului pot provoca reacții alergice la persoanele susceptibile. În aceste cazuri, masca nu trebuie să fie folosită și trebuie să contactați producătorul.
- ATENȚIE:** Dacă vă simțiți incomod după ce ați purtat masca pentru o lungă perioadă de timp, îndepărtați masca, încetați să o utilizați și contactați producătorul.
- ATENȚIE:** Masca „AllegraMask® PRO” nu oferă niciun fel de protecție împotriva impacturilor mecanice, șocurilor, fragmentelor, pieselor mecanice și altele asemenea.
- ATENȚIE:** Masca de protecție a feței „AllegraMask® PRO” nu trebuie folosită sau inocuită dacă este crăpată sau deteriorată în orice alt mod, prezintă modificări de formă și culoare, a fost expusă substanțelor chimice, uleiurilor sau grăsimilor, câldurii extreme sau perioadelor lungi de soare au fost expuse. Este posibil ca daunele să nu fie vizibile pentru utilizatorul final.

5. Curățare și dezinfectare

Vă rugăm să curățați sau să dezinfectați masca după fiecare utilizare. La schimbarea utilizatorilor, masca trebuie dezinfectată.

5.1. Curățare

Spălați toate părțile în apă caldă folosind o soluție cu săpun sau detergent Ph neutru; apoi clățiți sub jet de apă caldă pentru a îndepărta orice reziduu. Nu trebuie utilizate agenți foarte alcaline, acide sau alcoolici, perii, materiale abrazive sau alte